


Indstilling og programmering af ControlCOCKPIT

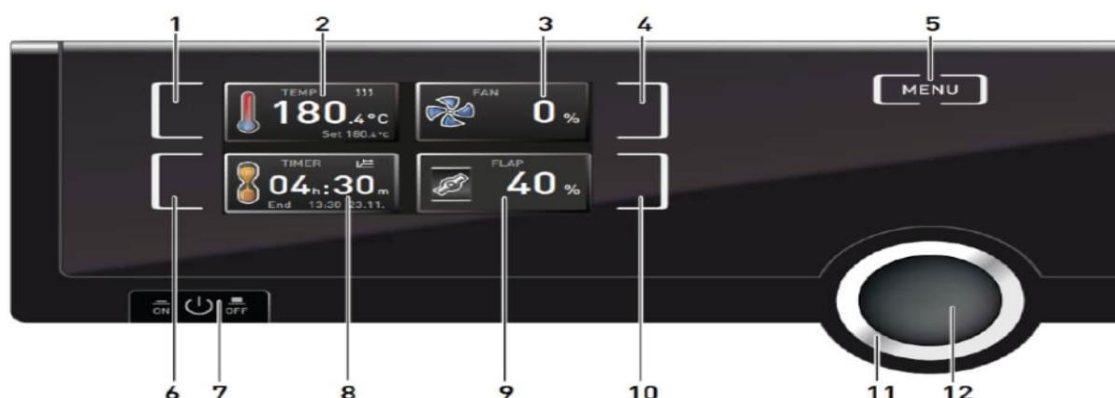

1. **Tænd/sluk** sterilisatoren på on/off knappen (7)

2. **Temperatur** (2)

- Tryk på (1), der aktiverer temperaturindstilling
- Knap (11) anvendes til at vælge temperatur. Drej knappen til højre for at øge og til venstre for at sænke temperaturen. Når den ønskede temperatur vises i displayet, tryk på knappen (12) for at gemme.

3. **Tid** (8)

- Tryk på (6) for at aktivere tidsindstilling.
- Brug igen knap (11) til at vælge tid, og (12) for at gemme.
- Tiden starter først, når sterilisatoren har opnået den ønskede temperatur.

4. **Sluk** efter brug på on/off (7)

5. Næste gang sterilisatoren tændes, vil indstillingerne være som sidst anvendt/ indstillet – se s. for daglig guide.

Indstilling og programmering af Menu, Fan og Flap

- Menu (5) anvendes til indstilling af dato, klokkeslæt, enheder, sprog med mere. Standard sprog er engelsk.
- Fan (3) kontrollerer hastighed af indvendig propel, der øger luftflow (0 - 100 %). Som standard anbefales 100 %.
- Flap (9) til kontrol af luftudskiftningen. 0 % = lukket / 100 % = helt åben. Som standard anbefales 0 %.

Tørsterilisation: Temperatur og tid


Godkendt sterilisation af genanvendelige instrumenter i henhold til WHO/NIR

- 160 °C i 120 min.
- 170 °C i 60 min.
- 180 °C i 30 min.

Til instrumenter af rustfrit stål anbefales 160 °C i 120 minutter, da det forlænger instrumenternes levetid frem for de højere temperaturer, der kan beskadige og være hårde for overfladen.

Kilde: [NIR, Sterilisation med tør varme, s. 26](#)

Husk Pak ovnen, så luften kan komme rundt om pakker/ instrumenttæsker

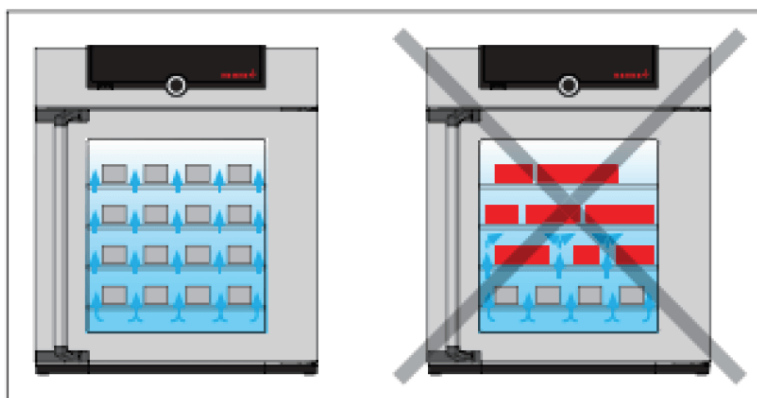

OBS - Denne quickguide erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet.

Quick-Guide til Memmert SF 30/55/75




Daglig kørsel:

Når tørsterilisatoren er indstillet, er det eneste der skal gøres ved dagligt brug følgende:

1. **Tænd** sterilisatoren på on/off knappen (7) – lille knap nederst på maskinen
2. **Læg de rengjorte instrumenter ind i maskinen**, så der kan komme luft om pakker/ instrumentæsker.
3. **Luk lågen** og den vil starte opvarmningen og programmet som er indstillet.

Husk Pak ovnen, så luften kan komme rundt om pakker/ instrumentæsker

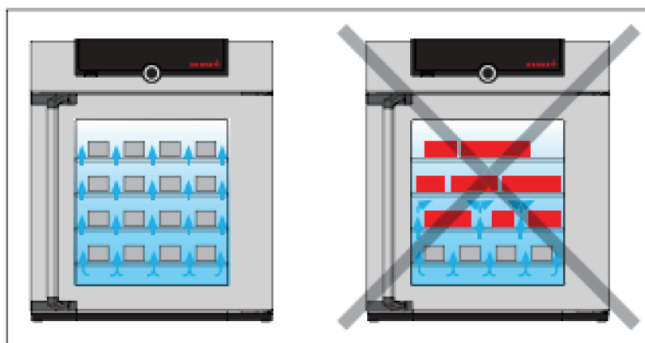

Løbende kontrol af maskinen:

Daglig kontrol:

1: Daglig kontrol vha. tørsterilisationstape, som sættes på de indpakkede instrumenter. (tapen tester at temperaturen i ovnen har været oppe på 160-180 grader og skrifter farve til brun)

2: Kemiske indikator: Her skal I bruge minimum 3 stk. i hver kørsel I kører - som placeres 3 forskellige steder i ovnen evt. I instrumentæske. Den reagerer på tid og temperatur. Den skifter farve fra grøn til brun/sort efter 10 minutter.

Kontrol hver 3. mdr :

3: Anvende biologisk indikator - de 3 test placeres 3 forskellige steder i ovnen og gerne fx i instrumentæske. De registrerede valideringer samt kontrol af sterilisationsprocesser, skal sendes til SSI i den vedlagte kuvert.