



C5881

ELEKTRISK BÅRE

INSTRUKTIONER

*** Læs før første brug.**

etiqueta CE

INDEKS

Symboler*

1. Generelle instruktioner
2. Brugsanvisning
 - 2.1 Installation - Montering
 - 2.2 Understøttet vægt
 - 2.3 Højdejustering
 - 2.4 Modul regulering
 - 2.5 Justering af tilbehør
3. Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner
 - 3.1 Metal struktur
 - 3.2 Løftesystem
 - 3.3 Polstring
4. Reklamationsret
5. Teknisk datablad
6. Polstrede polstring
7. Ofte stillede spørgsmål Motorer og polstringsbehandling

SYMBOLER



Følg instruktionerne i manualen.

Det er vigtigt, at du omhyggeligt læser og respekterer brugsanvisningen og forebyggende sikkerhedsforanstaltninger.



Advarsel eller forsigtighed: Angiver, at der er en risikosituation, som, hvis den ikke undgås, kan forårsage:

Til. Alvorlige og endda livstruende skader på patienten.

b. Skader af mild eller moderat sværhedsgrad på patienten.

c. Materielle skader på udstyret.

Hvis brugen af denne enhed forårsager eller bidrager til tilstedeværelsen af en uønsket hændelse, såsom død eller alvorlig personskade på brugeren, SKAL producenten straks informeres via e-mail vigilanciaps@ecopostural.com eller forhandleren. I Den Europæiske Union skal brugeren også underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han eller hun befinder sig.



Sid ikke på sektioner eller moduler såsom nakkestøtte, armlæn eller bundsektion/fødder, da de ikke er designet til at bære personens fulde vægt



Produkt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr af 5. April 2017: Forordning (EU) 2017/745



Angiver, at lejet er et medicinsk udstyr



Fabrikantens navn, adresse og fremstillingsdato



Angiv lejets model



Entydigt enheds-id



Fremstillingsdato



Partinummer



IEC 60417-5172 dobbeltisoleret udstyr



Elektriske forbrugskomponenter, der kan genbruges

Det indikerer, at enhedens elektriske og elektroniske komponenter kan genbruges og skal bortskaffes separat.



Adskillelse af affald fra brugte produkter og emballage gør det muligt at genanvende og genbruge materialer. Genbrug af genbrugsmaterialer hjælper med at undgå miljøforurening og reducerer efterspørgslen efter råmaterialer.

* afhængig af modeller

Ecopostural takker dig for at købe et af vores produkter. Denne vare er fremstillet efter meget undersøgte kvalitets- og sikkerhedsprocesser. For at du kan nyde det i mange år, skal du bruge det korrekt ved at følge disse instruktioner. For flere detaljer, se afsnittet TEKNISKE OPLYSNINGER på Ecopostural hjemmesiden: www.ecopostural.com.

De ekkoposturale bårer er designet med det formål at fungere som støtte for patienten under undersøgelse og/eller behandling af fagfolk inden for områder som fysioterapi, rehabilitering og relaterede discipliner eller under deres tilsyn.

Virksomheden er ikke ansvarlig for skader, der kan forårsages på produktet, hvis brugs- og vedligeholdelsesvejledningen ikke følges korrekt, samt for enhver ulykke eller skade, der kan forårsage forkert og/eller uagtsom brug.


ELEKTRISK BÅRE INSTRUKTIONER

1) GENERELLE INSTRUKTIONER

- Først og fremmest råder vi dig til at læse omhyggeligt og anvende brugsanvisningen og sikkerheden. Gem instruktionerne til senere brug.
- Det anbefales at gøre dig bekendt med den korrekte brug af varen inden brug.
- Brugen af båren kan være farlig, hvis den håndteres uhensigtsmæssigt eller anderledes end sin egen af ukvalificeret personale. Vær forsigtig, da der er risiko for fastklemning mellem bevægelige dele og uventede bevægelser.
- Kontroller båren regelmæssigt i sin helhed for tegn på beskadigelse eller beskadigelse. Kontroller også tilstanden af kablet og stikket; Vær forsigtig, når du håndterer dem, og undgå at bøje dem.
- Finishen på hver af bårens dele og komponenter følger en omhyggelig kvalitetskontrol, men vær forsigtig, når du håndterer dem, da de kan præsentere vinkler og fremspring, der kan forårsage utilsigtet skade under håndtering.



Når du hæver eller sænker båren eller betjener dens moduler, SØRG FOR, AT HVERKEN PATIENTEN ELLER TERAPEUTEN ER FANGET mellem de bevægelige dele af løftemekanismen af hænder, fødder eller nogen anden del af kroppen eller tøjet. Vær forsigtig, da der er risiko for fastklemning mellem bevægelige og faste dele af båren eller på grund af uventede bevægelser ved betjening af dens moduler. Betjen kun båren, når der ikke er mulighed for, at nogen del af kroppen kan blive fanget og skadet, mens du flytter båren op/ned eller aktiverer hældningen af de moduler, der udgør den.

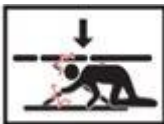

Vær særlig opmærksom i tilfælde af børn og/eller uautoriseret personale. Efterlad ikke børn alene eller uden opsyn i området omkring bordet. Vedligeholdelse eller rengøring bør kun udføres af autoriseret personale og med båretrevsystemerne korrekt låst.

- Defekte eller brugte dele skal udskiftes med det samme, og der skal kun anvendes originale reservedele fra producenten til hver specifik model.
- Alt tilbehør, dele eller dele skal monteres og placeres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Fremmedlegemer kan være farlige for folk, der håndterer båren.

*** Bemærk:** I tilfælde af brug af uoriginale dele eller ændring af varen, bortfalder producentens garanti. I dette tilfælde skal både fabrikantens anvisninger og certifikatet for

overensstemmelse mister deres gyldighed.

Ecopostural forbeholder sig retten til at ændre sine produkter og tekniske egenskaber. De endelige mål og vægte af produkterne kan variere fra dem, der er angivet her: måler ± 5 cm / vægte ± 5 kg / bevægelser $\pm 10^\circ$.

Fremstillingsprocessen af vores produkter er specialfremstillet, hvilket giver vores produkter en unik og helt personlig finish.

Derfor vil returnering af ethvert Ecopostural produkt ikke blive accepteret, da den brugerdefinerede fremstilling reagerer på et specifikt valg af mål, farve osv.

Modulernes design og bårens hældningsvinkler er udtænkt og tilpasset, så båren bruges inden for fagområder som fysioterapi, rehabilitering og relaterede discipliner, hvorfor de følger specifikke dimensioner og tilpasser sig de egenskaber, der kræves til disse fagområder.



OBS: Vær forsigtig, da der er risiko for fastklemning mellem bevægelige og/eller faste dele og uventede bevægelser. Betjen kun båren, når der ikke er mulighed for, at nogen del af kroppen kan blive fanget og skadet, mens du flytter båren op/ned eller aktiverer hældningen af de moduler, der udgør den.

2) BRUGSANVISNING

2.1) INSTALLATION - Montering

Båren vejer cirka 100 kg og kræver mindst to personer til at pakke den ud.

For at løfte båren skal du tage godt fat i strukturens ramme under polstringssengen. Forsøg ikke at løfte den ved at holde den i polstringen eller ved bårens løftemekanisme, da dette kan beskadige den.

Vær forsigtig, og for at undgå personskade må du ikke flytte eller løfte båren uden at bruge de nødvendige sikkerhedsprocedurer

Båren skal hvile på et solidt, plant gulv.

For at få din bære til at tilpasse sig små uregelmæssigheder i gulvet, kan du gøre brug af en af **de nivelleringsanordninger**, der er placeret i bunden af to af benene, skrue eller skrue af, indtil båren er afbalanceret.

Advarsel: På nogle jordtyper kan poterne efterlade mærker efter længere tids kontakt. For at forhindre dette skal du konsultere gulvproducentens specifikationer.

For at flytte båren skal hjulene frigøres ved at trykke på håndtagene ved siden af dem i bunden, og når de er på plads, skal du lade dem være fastgjort igen og løfte dem.



Disse hjul er til at flytte båren tom, **IKKE til patienttransport.**
Før patienten klatrer op på båren, **SØRG FOR AT LÅSE HJULENE.**

Hvis nivelleringsanordningerne er for skruede af, kan de gnide mod jorden og forhindre hjulene i at fungere korrekt. Vi anbefaler at skrue nivelleringsanordningerne så hurtigt som muligt, før du flytter, og nulstille dem på det nye sted. På "bløde" gulve (tæpper, tæpper osv.) vil hjulene ikke fungere korrekt.

2.2 UNDERSTØTTET VÆGT

Denne vare er blevet testet til at understøtte en **MAKSIMAL STATISK VÆGT på 250 kg**. Distribueret

Ensartet.

** Hvis denne vægt overskrides, kan båren falde langsomt ned, uden at motoren virker, på grund af aktivering af et sikkerhedssystem. Reducer belastningen for at få den til at fungere korrekt igen.*

Det tilrådes ikke at hvile al vægten i den ene ende for at forhindre, at den vipper.

Hvis et bestemt punkt med for højt tryk nås, kan den polstrede base gå i stykker. Forhindre patienter i at forsøge at klatre ved at knæle.

Hvert modul kan separat bære maksimalt 50 kg.

For at **komme** på bordet skal du sænke bordets højde til den mest behagelige position for patienten. Lad derefter patienten sidde i midten af sengen, hæve benene og ligge på siden. Når du er i denne position, kan du lægge dig ned. Det er meget vigtigt at dele vægten.

Når **du stiger af** båren, skal du justere bårens højde til den laveste position. Hvis patienten er i tilbøjelig stilling (med forsiden nedad), skal du bede ham om at glide sideværts et par centimeter, ligge på siden og sætte sig op igen ved hjælp af armene, bringe benene ud af siden af bordet, så han sidder igen.

Hvis patienten ligger på ryggen, skal du bede ham om at sætte sig op ved hjælp af armene og vende tilbage til siddende stilling for at kunne komme af bordet.



OBS: De nederste moduler og ryglænet skal understøtte de tilsvarende dele, aldrig for at bære vægten af hele patienten. Patienten bør ikke læne sig op ad det nederste modul eller ryglænet for at skubbe sig selv, da det ikke er designet til at modstå et sådant tryk og kan medføre risiko for, at båren vælter. Hvert modul kan separat bære maksimalt 50 kg.

2.3) Højdejustering


Løftesystemet er ved hjælp af en **elektrisk motor**.

For at fungere skal netledningen sættes i en 220-230V stikkontakt.

Tilpasset de nye regler er strømkablet 4 meter, type H05 BQ-F, der giver større beskyttelse og sikkerhed mod mulige defekter forårsaget af hjulene (det vil kun være angivet i det tekniske ark)



Når du hæver eller sænker båren eller betjener dens moduler, SØRG FOR, AT HVERKEN PATIENTEN ELLER TERAPEUTEN ER FANGET mellem de bevægelige dele af løftemekanismen af hænder, fødder eller nogen anden del af kroppen eller tøjet. Vær forsigtig, da der er risiko for fastklemning mellem bevægelige og faste dele af båren eller på grund af uventede bevægelser ved betjening af dens moduler. Betjen kun båren, når der ikke er mulighed for, at nogen del af kroppen kan blive fanget og skadet, mens du flytter båren op/ned eller aktiverer hældningen af de moduler, der udgør den.

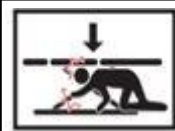

Vær særlig opmærksom i tilfælde af børn og/eller uautoriseret personale. Efterlad ikke børn alene eller uden opsyn i området omkring bordet. Vedligeholdelse eller rengøring bør kun udføres af autoriseret personale og med bæredevssystemerne korrekt låst.

Brug fodpedalen til at justere højden. Tryk på kontakten med foden, indtil du når den ønskede højde; venstre for at sænke / højre for at hæve.

Afstanden fra den nederste ende af båren til jorden er < 150 mm, derfor er den IKKE egnet til fastgørelse af en standard løfteanordning med en 150 mm base.

Placering af genstande, der er over 14 cm høje under båren, kan føre til farlige situationer og forårsage

alvorlige skader.

2.4) Modul regulering

Hoved-/ryglænets **hældning** reguleres af hydraulik (3)

Centralmodulets hældning reguleres af hydraulik (3) Fodmodulets

hældning reguleres af tandstang (2)

(2) Lynlås: For at justere højden på modulet skal du holde det med en hånd på hver side. Hæv modulet til den angivne højde, og lynlåsen vil placere sig selv. For at sænke den skal du først hæve den maksimalt for at låse mekanismen op.

** Sørg for, at begge sider er sikkert fastgjort og i samme højde.*

(3) Hydraulisk: Tryk på håndtaget under polstringen for at aktivere hydraulikken, og modulet går op. Når du slipper den, forbliver den fast. For at sænke den skal du trykke på håndtaget og holde det nede med den ene hånd og med den anden skubbe modulet til den ønskede position.



Juster ALDRIG nogen sektion eller bevægelig del af bordet , **NÅR PATIENTEN LÆNER SIG op ad det med al sin vægt.**
KØR IKKE FINGRENE OVER SIKKERHEDSKANTEN for at undgå at blive fanget.

2.5) Justering af tilbehør

Sådan justeres leddelte **benløgner**

Højde: Skru det sorte sidehåndtag af for at frigøre stangen, og placer benløgneren i den ønskede højde eller træk den ud. Skru det for at fiksere det.

Vip: Skru det sorte håndtag af under støtten for at frigøre kugleleddet og vip benremmen til den ønskede position. Skru det for at fiksere det.

** Ved at trykke på knappen kan du ændre håndtagets position uden at skrue/skrue af, dette giver dig mulighed for at betjene dem selv meget tæt på strukturen samt placere dem, så de ikke forstyrrer dig.*

3) Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

3.1) Metal struktur

For at sikre korrekt vedligeholdelse af behandlingsbordet anbefales det at rengøre det regelmæssigt med en klud for at fjerne støv.

Det er vigtigt at udføre periodiske visuelle inspektioner for at kontrollere for beskadigede eller løse dele (skruer osv.).

** Undgå at placere behandlingsbordet permanent i områder med høj luftfugtighed.*

3.2) Løftesystem

Sørg for at holde motoren fri for støv og fedt.

Undgå at spilde væske på motoren, da de, selvom den er ordentligt beskyttet, kan beskadige de elektriske komponenter.

MOTOREN MÅ IKKE VÆRE TAMPERED under ingen omstændigheder, i dette tilfælde vil garantien gå tabt. Kontinuerlig intermitterende tryk på op/ned-enheden kan aktivere termisk beskyttelse ved overophedning.

For flere detaljer **se "OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM MOTORER"** på næste side. Hvis der opstår et nedbrud, skal du kontakte din leverandør eller Ecopostural.

Prøv at holde mekanismerne fri for støv og fedt.

HYDRAULISKE STEMPLER OG/ELLER MOTORER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÅNTERES.

CONCEPT, da det vil medføre annullering af garantien.

I tilfælde af funktionsfejl skal du kontakte din leverandør eller Ecopostural.

3.3) Polstring

Det anbefales at fjerne støv med annonceamp klud. Når det ikke er nok, skal du tørre af med sæbevand og en blød svamp og tørre grundigt med en klud. Undgå at vaske og skylle med for store mængder vand, så det ikke trænger igennem sømmene.

For bedre beskyttelse mod sved, cremer eller massageolier anbefales det at bruge et beskyttende lagen/håndklæde, såsom A4469, A4459 eller A4460.

I tilfælde af pletter skal det straks behandles med sæbevand. **Brug ikke alkohol og undgå helt alle opløsningsmidler og pletfjernere** på markedet, da de kan beskadige polstringen. Brug af infrarøde lamper kan knække kunstlæderet. For at undgå dette skal du dække med bomuldstæpper, håndklæder eller lignende.

*** For mere information SE DE SPECIFIKKE INSTRUKTIONER VEDHÆFTET.**

4) Reklamationsret



GARANTIA ECOPOSTURAL



Ecopostural tilbyder dig **3 års** garanti mod enhver fabrikationsfejl fra købsdatoen. Af denne grund skal fakturaen eller anskaffelsesdokumentet, der vil have virkning som et garantibevis, opbevares.

Naturlig slitage på produktet (i tilfælde af kunstlæder) er udelukket fra garantien. Fejl eller forringelse forårsaget af forkert brug (f.eks. forkert rengøring af polstringen), forkert udpakning (f.eks. skæring med en fræser) eller tilfældige årsager er heller ikke inkluderet.

I tilfælde, hvor garantien gælder, vil omkostningerne ved reparation eller udskiftning blive afholdt af Ecopostural, herunder omkostningerne ved udskiftning af produktet inden for EU.

For eventuelle garantirelaterede problemer, kontakt venligst din leverandør.

PRODUCTO

FREMSTILLET AF ECOPOSTURAL, S.L.U.

ESB12433991

Avda. Enrique Gimeno, 27 - 12006 Castellón de la Plana, **SPANIEN**

www.ecopostural.com / info@ecopostural.com / 964 50 30 21




Dette produkt skal bortskaffes anderledes end kommunalt affald. Når dens levetid er udløbet, skal den deponeres på en særlig indsamlingsstation.



Adskillelse af affald fra brugte produkter og emballage gør det muligt at genanvende og genbruge materialer. Genbrug af genbrugsmaterialer hjælper med at undgå miljøforurening og reducerer efterspørgslen efter råmaterialer.

5 - TEKNISKE DATA C5881

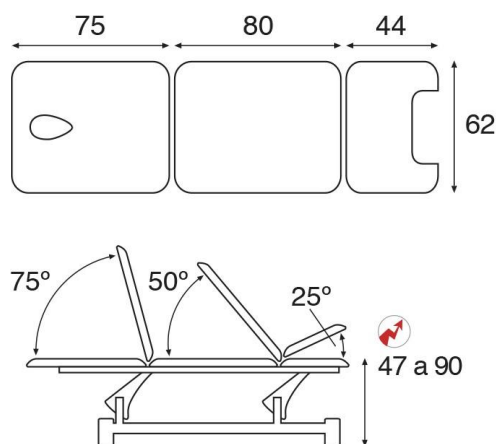

Generelle egenskaber

Hvid krumtap elektrisk bære specialiteter

Standard sengetøj: 62x200 cm (M47)

Mål sengetøj ekstraudstyr: 70x200 cm (M67)

Maksimal anbefalet vægt: 250 kg

Højdevariation: 47-90 cm

Højdejustering via elektrisk motor med fodbetjening. Sideforskydningsløft < 20cm

Struktur lavet af stålør, belagt med hvidt pulvereboxymaling brændt i en ovn ved 250 °C

Ben på 70 mm i diameter.

Ben med justerbar nivellering i to af dem. 4 ben med skridsikkert gummi. Båre forsynet med lejer i plejlstangen.

Udtrækkelige hjul med pedalen. Kun bevægelse af båren i vakuum, IKKE til patienttransport. Standard foldbar rulleholder.

Standard ryglæn type T13 - Rektangulært ryglæn. Dråbehul med prop medfølger. Leddelte benløgner (A4705) justerbare i højden og aftagelige. Aftagelig bakke i rustfrit stål på 15x30x4 cm.

Hoved-/ryglænsmodul justerbart med hydraulisk stempel. Centralmodul justerbart med hydraulisk stempel.

Fodmodul kan justeres manuelt med lynlås. Omtrentlig vægt: 94 kg

Polstring funktioner

Betrukket med brandsikkert kunstlæder Klasse: M-2 i henhold til CE-regler. Med desinficeret® antimikrobiel og antibakteriel beskyttelse.

Fås i 25 farver. Skumtykkelse 5 cm.

Skumfasthed klasse II - Medium

Elektriske motorfunktioner

150 mm slaglængde

1-230V asynkronmotor. AC ± 10 %

integreret termisk beskyttelse

Nominal kraft: 9000N - Nominal hastighed: 11 mm/s

Spænding: 230V/50-60 HZ - Strømforbrug: 3,7A

Driftscyklus: 25s tændt / 400s slukket

Sikkerhedsklasse: II - Standardbeskyttelse: IPX4

Overholder direktivet om elektromagnetisk interferens

Ecopostural forbeholder sig retten til at ændre sine produkter og tekniske egenskaber. De endelige mål og vægte af produkterne kan variere fra dem, der er angivet her: mål ± 5 cm / vægte ± 5 kg / bevægelser $\pm 10^\circ$. Fremstillingsprocessen af vores produkter er specialfremstillet, hvilket giver vores produkter en unik og helt personlig finish. Som følge heraf

. returnering af ethvert Ecopostural produkt, da den specialfremstillede fremstilling reagerer på et specifikt valg af mål, farve osv.

6- POLSTREDE POLSTRING

NOGLE OPLYSNINGER OG TIPS

Ecopostural har brugt en kunstlæder af høj kvalitet fremstillet af Benecke-Kaliko (Continental Group) til polstring af dette produkt, som overholder D60-070-standarden for husholdnings-, fødevare- og farmaceutiske produkter.

Det er en brandsikker imiteret læderklasse M2 i henhold til CE-reglerne, dette betyder, at kun det område, der er i kontakt med en antændelseskilde eller et glødende materiale, vil brænde, men på en gradvis og overvejende flammeløs måde.

Det behandles også med Sanitized®, en antimikrobiel og antibakteriel beskyttelse.

Dens tekniske egenskaber er designet til at give god ydeevne.

For at bevare disse egenskaber og opnå et godt resultat og lang holdbarhed anbefaler vi, at du følger følgende ANBEFALINGER:

Periodisk vedligeholdelse:

- Det tilrådes at fjerne støv eller snavs regelmæssigt. Brug en hvid fugtig klud.
- Når dette ikke er nok, skal du tørre af med sæbevand (vand med et par dråber neutral sæbe) og en blød svamp og tørre helt med en klud.
- Brug ikke andre produkter, de kan beskadige det øverste lag af lak, der beskytter kunstlæderet mod eksterne stoffer.
- Brug ikke for store mængder vand, når du vasker og skyller for at forhindre, at det trænger gennem sømmene.

Pletrensning:

- Du skal handle hurtigt, så stoffet ikke trænger ind, vask straks med sæbevand.
- Brug ikke alkohol og undgå alle opløsningsmidler og pletfjernere generelt, da de normalt indeholder elementer, der er skadelige for polstringen.
- Hvis du også beslutter dig for at bruge disse rengøringsmidler, er det på eget ansvar. Vi anbefaler, at du tester et område, der ikke er synligt før brug.

Forebyggelse er bedre end helbredelse:

- De polstrede overflader, der er udsat for direkte kontakt med patienter (ansigt, bryst, hænder), er mere tilbøjelige til at blive forringet på grund af transpiration og andre former for udsondring.
- De cremer og olier, der bruges i terapier, kan overføres til polstringen, hvilket påvirker dens holdbarhed.
- Vedligeholdelse eller rengøring med forkerte produkter kan også forringe polstringen.
- Farvestofferne i nogle beklædningsgenstande (f.eks. denim/jeans) kan overføres til polstring, især lysere nuancer, der er mere sårbare.
- Brug af lamper og varmekilder kan tørre ud og revne polstringen.
- Vær særlig forsigtig, når du anvender teknikker, der kræver brug af intens varme (f.eks. moxibustion)

Du vil bemærke, at polstringen begynder at forringes, når området bliver skinnende, med en stivere fornemmelse, og med tiden vil det ende med at revne.

Derfor anbefaler vi kraftigt, at du BESKYTTER lejet eller polstrede produkter korrekt med et tykt stofbetræk eller beskyttelseshåndklæde for at forhindre for tidlig nedbrydning af kunstlæderet.

Garanti

Benecke-Kaliko (Continental Group) kan ikke holdes ansvarlig, når forkert brug eller vedligeholdelse ødelægger kunstlæderbeskyttelseslakkerne og gør dem skøre. ECOPOSTURAL oplyser dig hermed og minder dig om, at polstring af denne grund ikke er dækket af garantien i disse tilfælde.

7- OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM MOTORER

Problem:	Mulige årsager:	Løsninger:
Motoren bevæger sig ikke. 	Aktuatoren modtager ikke strøm.	Kontroller stikkontakten, netledningen og stikforbindelsen.
	Styrekablet er ved et uheld blevet frakoblet.	Tilslut styrekablet korrekt.
	Styrekablet har snit eller skader.	Udskift kontrolkablet.
	Byrden er for stor.	Reducer byrden. Hvis belastningen anbefales, og aktuatoren stadig ikke bevæger sig, skal du kontakte leverandøren (tjek resten af punkterne først)
Betjeningslementerne fungerer ikke normalt eller Motoren aktiveres uden betjening af styringen. 	Fjernbetjeningen trykkes ned og sender en kontinuerlig kommando til motoren.	Juster det perifere drev igen. Kontakt leverandøren for præcise instruktioner.
	Controlleren er gået i stykker.	Udskift med en ny controller.
Båren sænker sig selv uden at have aktiveret motoren.	Byrden er for stor.	Reducer byrden. Hvis belastningen er som anbefalet, og båren fortsat sænkes, skal du kontakte leverandøren (tjek resten af punkterne først)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM MOTORER

Du skal vide, at:

Motoren har en TERMISK BESKYTTELSMEKANISME. Kontinuerlig aktivering kan få motoren til at overophedes, hvilket får den til at blive afbrudt. Motoren vil ikke blive beskadiget, men den skal have lidt nedkølingstid, før den kører igen. For at forhindre, at beskyttelsen snubler, skal du være omhyggelig med at stoppe med at aktivere motoren, så snart den når stop.

AKTIVERINGSMEKANISMEN er gennem et system af luft og indre tryk, så en ændring i kredsløbet eller i miljøforholdene kan påvirke dets funktion.