



BD Eclipse™

Designet og fremstillet
til sygeplejersker og patienter.



Beskyttelse til sundhedspersonalet

BD Eclipse™ sikkerhedsinjektionskanyler er nem at bruge, kræver minimal oplæring og understøtter strømlinet og omkostningseffektiv overholdelse af standarder for alle behandlere, hver dag ¹.

BD Eclipse™ kanyleserie er fremstillet med gennemprøvet teknologi, der opfylder testkravene i den internationalt anerkendte ISO 23908-standard for beskyttelse mod nålestikskader.



På ét hospital var sygeplejerskerne i stand til at reducere antallet af selvrapporterede nålestikskader betydeligt (sammenlignet med ingen intervention eller produktoplæring alene) ved at introducere BD Eclipse™ kanylen sammen med en interaktiv workshop ²


(1) BD Eclipse Påstand 1, Sikkerhed, brugervenlighed, effektivitet, 2016

(2) Van der Molen HF, Zwinderman KA, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Better effect of the use of a needle safety device in combination with an interactive workshop to prevent needle stick injuries. Safety Science. 2011;49(8-9):1180-1186.6


BD Eclipse Smartslip™

Den rigtige BD Eclipse™ til den rigtige sprøjtespids

Kanyleansatsen, der er specialdesignet med SmartSlip™-teknologi, inkluderer en plastikklemme, der hjælper med at sikre forbindelsen til Luer-Slip-sprøjter. Et hørbart klik indikerer, at kanylen er sikkert påsat.

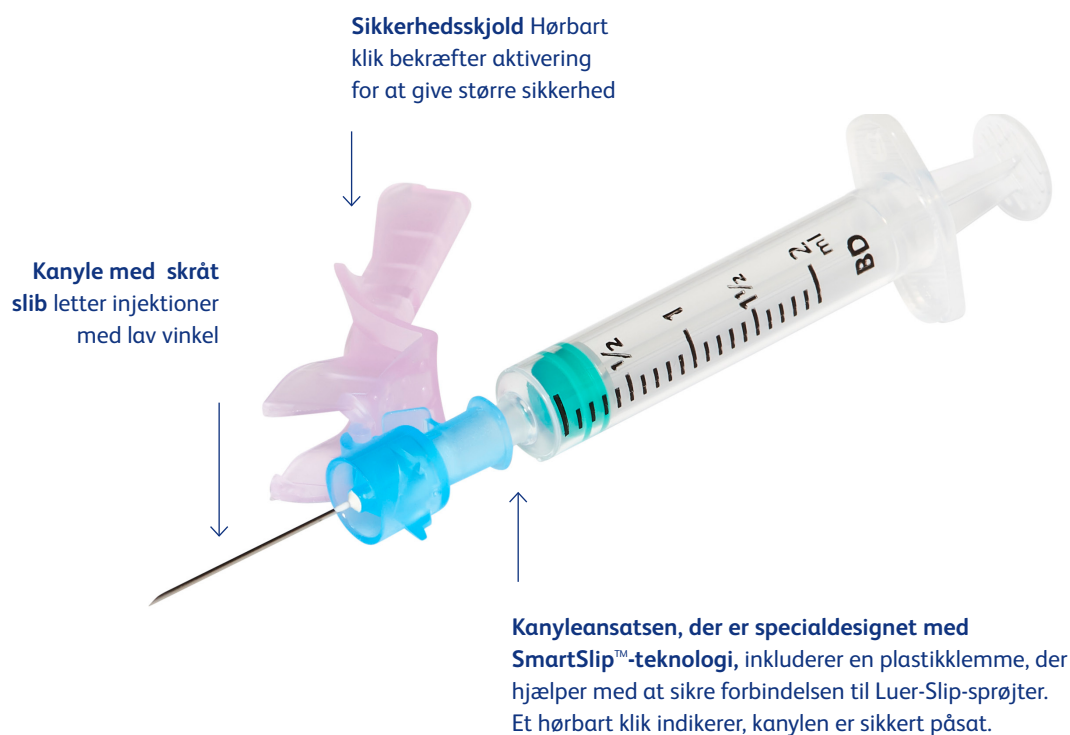

Kanyle med skråt slib letter injektioner med lav vinkel

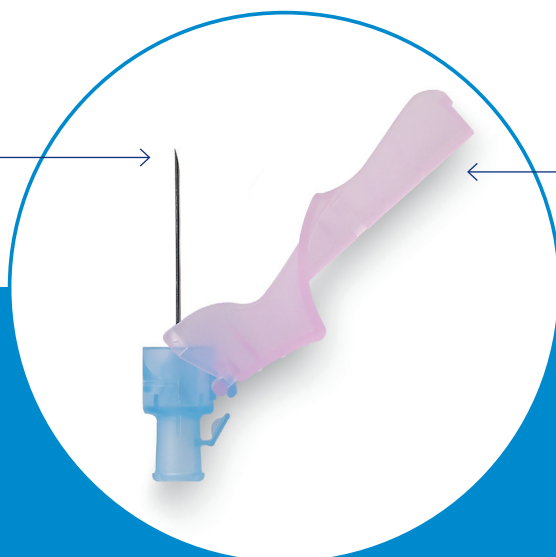

Det let genkendelige lyserøde sikkerhedsskjold sikrer og omslutter kanylen fuldt ud ved aktivering



BD Eclipse sikkerhedskanyler™

Varenummer	Gauge/mm	Længde (mm)	Længde (tommer)	Farvekode	Opbevaringsæske/ forsendelseskasse
305771	30G/0,3 mm	13	½"	Gul	100 / 1.200
305770	27G / 0,4 mm	13	½"	Grå	100 / 1.200
305760	25G / 0,5 mm	16	⅝"	Orange	100 / 1.200
305891	25G / 0,5 mm	25	1"	Orange	100 / 1.200
305892	23G / 0,6 mm	25	1"	Blå	100 / 1.200
305894	21G / 0,8 mm	25	1"	Grøn	100 / 1.200
305895	21G / 0,8 mm	40	1 ½"	Grøn	100 / 1.200
302437	18G / 1,2 mm	40	1 ½"	Pink	100 / 1.200

Yderligere oplysninger

Materiale

Komponent	Materiale
Kanyleansats	Polypropylen og farvestoffer
Sikkerhedsskjold	Polypropylen
Kanyle	Rustfrit stål (18-20 % krom, 2 % mangan, 1 % silicium)
Klæbemiddel	Epoxyharpiks
Smøremiddel	Silikoneolie af medicinsk kvalitet

Emballagemateriale

Komponent	Materiale
Enhedspakke	Papir: papir til medicinsk brug 60 gr/m² Film: Polyamid/Polyethylen
Opbevaringsæske	Karton
Forsendelseskasse	Bølgepap

Opbevaringstid	Opbevaringsforhold	Fremstillingsland
5 år	Der kræves ingen særlige opbevarings- eller håndteringsforhold. Det anbefales at opbevare produktet et tørt og varmt sted, beskyttet mod stærkt lys.	Spanien

Klassificering

Medicinsk udstyr i klasse IIa i henhold til bilag IX, afsnit III, regel 6 i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

Steriliseringsmetode

Ethylenoxid

CE 0050

Becton Dickinson Denmark A/S · Lyskær 3 E, 1 tv., 2730 Herlev, Danmark

bd.com

BD, BD-logoet og Eclipse er varemærker tilhørende Becton, Dickinson and Company eller dets datterselskaber. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. © 2023 BD. Alle rettigheder forbeholdes. BD-105853 (10/23)

