


Varenummer 1000012280

Blodprøvetagningsglas, serumanalyse, BD Vacutainer, SST II Advance-rør, gul, PET, 5 ml, transparent, plast, med Hemogard lukning

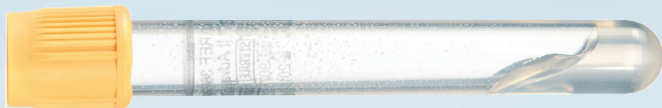

Produktbeskrivelse

I gelrøret dannes der under centrifugeringen en inaktiv gel mellem serum og koaguleret blod som en diffusionsbarriere, der forhindrer cellebestanddele i at kontaminere den diagnostiske prøve eller blodlegemer i at nedbryde f.eks. glukose. Til rør til klinisk kemi skal serummet til visse analytter (f.eks. kalium, fosfor og glukose) adskilles fra cellerne i løbet af få timer, da måleværdierne ellers vil blive markant forvansket. BD-gelrør tillader ikke diffusion, og dermed er rutinemæssige analytter i klinisk kemi og endog kalium og glukose stadig stabile efter en uges opbevaring ved 2-8 grader. Hemogard™ (BD)-lukning beskytter dig mod blod, der kan sprøjte, når røret åbnes. Gummiproppen er forsænket inde i plastikskjoldet, hvilket forhindrer eksponering for blod på proppen

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsglas
Varemærke	BD
Vareserie	Vacutainer
Model	SST II Advance-rør
Farve	Gul
Features	5 ml, transparent, plast, med Hemogard lukning
Materiale	PET
Længde/dybde	10 cm
Diameter	1.3 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	55.5 cm	18.5 cm	31 cm	50382903665667
pk	100 stk	18 cm	15 cm	11 cm	30382903665663
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.