


5 - TEKNISKE FUNKTIONER C5533

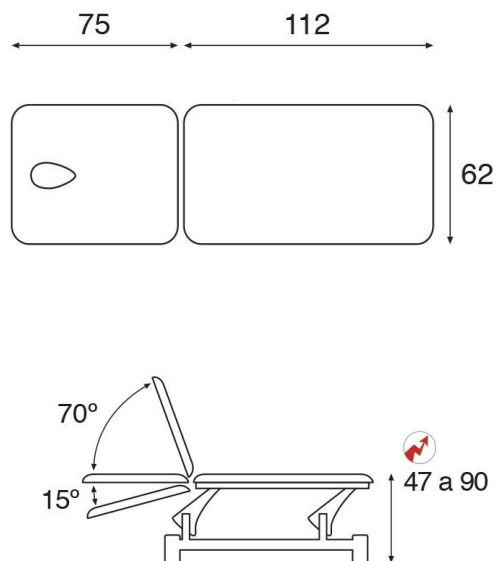

Generelle karakteristika

2-delt elektrisk hvid rammebord med to søjler.

Standard polstringsdimensioner: 62x188 cm (M44)

Valgfrie polstringsdimensioner: 70x188 cm (M64)

Anbefalet maksimal vægt: 175 kg

Højdevariation: 47-90 cm

Elmotorstyret højdejustering via sideskinnesystem.

Højdejustering med sidejustering < 20 cm

Stålkonstruktion med hvid epoxypulverbelægning opvarmet ved 250°C
70 mm diameter stålben. Med bordudlignere i to af fødderne.

Bord med lejer.

Hjul med fodhåndtag der kan trækkes ind. Bare til at flytte bordet rundt, IKKE beregnet til patienttransport.

Aftagelig hvid papirrulleholder, der er inkluderet som standard.

Standard ryglæn type T13 - Firkantet ryglæn. Ovalt ventilationshul og prop inkluderet.

Hoved-/ryglæn kan justeres med gasfjeder.

Cirka. Vægt: 77 kg

Polstringsfunktioner

Brandhæmmende klasse M2 kunstlæder, EC-kompatibelt. Desinficeret® antimikrobiel og antibakteriel beskyttelse. Fås i 25 farver.

Skumtykkelse 5 cm.

Skumfasthed II - Blød

Elektriske motorfunktioner

Slaglængde: 150 mm

Effekt: 6000N - Gennemsnitshastighed ved belastning 0: 8,2 mm/s; Max. Belastning: 5,4 mm/s

Spænding: 24 V - Strømforbrug: 4,3A (gennemsnitlig)

Arbejdscyklus: 10%

Sikkerhedsklasse: II - Standardbeskyttelse: IPX4

direktiv i overensstemmelse med EMI (elektromagnetisk interferens)

Ecopostural forbeholder sig retten til at ændre sine produkter og foretage ændringer i tekniske data. Faktiske dimensioner og vægte kan variere fra de værdier, der er angivet i denne katalog: dimensioner ± 5 cm / vægt ± 5 kg / hældning $\pm 10^\circ$. Vores produkter er håndlavet og skræddersyet efter kundernes præferencer. Derfor accepterer vi ikke annullering, retur eller refundering af noget Ecopostural-produkt, fordi der tidligere har været et valg for en bestemt størrelse, farve...

BETRÆKNING**LIDT INFORMATION OG TIPS**

Ecopostural har brugt et høj kvalitets læder fremstillet af Benecke-Kaliko (Continental Group) til polstring af dette produkt, som opfylder D60-070-standarden for husholdnings-, fødevarer- og farmaceutiske produkter.

Dette betyder, at kun det område, der er i kontakt med en antændelseskilde eller et glødende materiale, vil blive påvirket, men på en gradvis og overvejende flammeløs måde. Det behandles også med Sanitized®, en antimikrobiel og antibakteriel beskyttelse. Dens tekniske egenskaber er designet til at give god ydeevne.

For at bevare disse egenskaber og opnå et godt resultat og lang holdbarhed, anbefaler vi, at du følger følgende **ANBEFALINGER:**

Periodisk vedligeholdelse:

- Det anbefales regelmæssigt at fjerne støv eller snavs. Brug en hvid, fugtig klud.
- Når det ikke er nok, tør du af med sæbevand (vand med et par dråber neutral sæbe) og en blød svamp og tør helt med en klud.
- Brug ikke andre produkter, de kan beskadige det øverste lag lak, der beskytter læderet mod eksterne stoffer.
- Brug ikke for store mængder vand ved vask og skylning for at forhindre, at det trænger ind gennem samlingerne.

Pletrensning:

- Du skal handle hurtigt, så stoffet ikke trænger ind, og skylle straks med sæbevand.
- Brug ikke alkohol og undgå alle opløsningsmidler og pletfjernere generelt, da de normalt indeholder ingredienser, der er skadelige for polstringen.
- Hvis du også beslutter dig for at bruge disse rengøringsmidler, er det på eget ansvar. Vi anbefaler, at du tester et område, der ikke er synligt før brug.

Forebyggelse er bedre end helbredelse:

- Du bør tage højde for de områder med mest friktion (ansigtsområde, bryst, hænder osv.) de er mest udsatte for forringelse; Sved og anden væske forværrer problemet.
- De cremer og olier, der bruges i terapier, kan overføres til polstringen, hvilket påvirker dens holdbarhed.
- Vedligeholdelse eller rengøring af upassende produkter kan også forringe polstringen.
- Farvestoffer fra visse tøjgenstande (f.eks. denim/jeans) kan overføres til polstring, især lysere nuancer, der er mere sårbare.
- Brugen af lamper og varmekilder kan tørre ud og revne polstringen.
- Vær særlig forsigtig, når du anvender teknikker, der kræver brug af intens varme (f.eks. moxibustion)

Du vil bemærke, at polstringen begynder at forringes, når området bliver blankt, med en stivere fornemmelse, og med tiden vil det revne.

Derfor anbefaler vi kraftigt, at du **BESKYTTER** dit Ecopostural-leje eller polstrede produkter ordentligt med et tykt stofbetræk eller et beskyttende håndklæde for at forhindre for tidlig nedbrydning af læderet.

GARANTI

Benecke-Kaliko (Continental Group) kan ikke holdes ansvarlig, når forkert brug eller vedligeholdelse forvrænger læderbeskyttelseslakkerne og gør dem sprøde. ECOPOSTURAL videregiver denne information og minder dig om, at polstring af denne grund ikke er dækket af garantien i disse tilfælde.