


Varenummer 244119

Subcutankanyle, BD Saf-T-Intima, blå, 0,75", 0,9 x 19 mm, steril

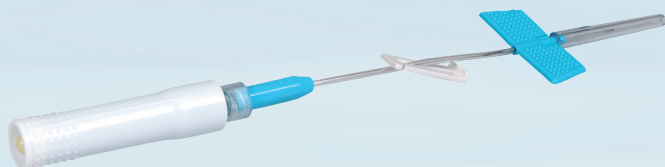

Produktbeskrivelse

BD Saf-T-Intima anvendes til subkutan injektion eller infusion. Kanylen indføres i en vinkel på 30-45 grader. Efter placering af den subkutane kanyle trækkes kanylen tilbage i sikkerhedsskjold og således forbliver kun et tyndt plastkateter i patienten, hvilket giver mindre gener. Fyldevolumen i slangen er 0,2 ml. Slangen skal ikke forfyldes. Liggetid 3-5 døgn i henhold til Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer 2016.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Subcutankanyle
Varemærke	BD
Vareserie	Saf-T-Intima
Farve	Blå
Features	0,75", 0,9 x 19 mm, steril
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	4 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	49.5 cm	26.9 cm	40.4 cm	50382903833288
pk	25 stk	24.9 cm	12.7 cm	19.2 cm	30382903833284



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE